

RELINÉ™ II Soft és RELINÉ™ II Extra Soft

Illeszkedés és kényelem az aktív élethez



Ismerkedjen meg a GC alábélelő anyagainak széles palettájával



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
anyag	akrilát rezin	A-szilikon	A-szilikon	akrilát rezin (MMA-mentes)
indikáció	<ul style="list-style-type: none"> felfekvési pontok implantációs kezelés alatt puha alábélelés nyálkahártya kondicionálás traumát / műtétet követően funkcionális lenyomat 	<ul style="list-style-type: none"> nyálkahártya alakítás érzékeny nyálkahártya felfekvési pontok irritált szövet normalizálása 	<ul style="list-style-type: none"> implantációs esetek felfekvési pontok csontos alámenős részek fájdalom csökkentése, komfort növelése hosszan tartó alábélelés hiányzó támasztószövet esetén 	<ul style="list-style-type: none"> hosszú távú alábélelés rosszul illeszkedő, nyálkahártya trauma nélküli fogsorok az utolsó lépés a puhán maradó alábélelő / nyálkahártya kondicionáló kezeléseket követően
idő a szájban	napok/hetek/hónapok	napok/hetek	hetek/hónapok	hónapok/évek

GC RELINE II Soft és Extra Soft elérhető kiszerezései

Intro Kit

010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit:** EEO
 1x GC RELINE II Soft Cartridge
 1x GC RELINE II Primer for Resin
 1x GC RELINE II Point for Trimming
 1x GC RELINE II Wheel for finishing
 1x GC RELINE II Remover for Resin

010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:** EEO
 1x GC RELINE II Extra Soft Cartridge
 1x GC RELINE II Primer for Resin
 1x GC RELINE II Point for Trimming
 1x GC RELINE II Wheel for finishing
 1x GC RELINE II Remover for Resin

Utántöltők

010266 GC RELINE II Soft Cartridge, 48 ml EEO
 010269 GC RELINE II Extra Soft Cartridge, 48 ml EEO
 010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml
 010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier), 1-1 Pack, 2x 9 ml
 010275 GC RELINE II Remover for Resin, 5,5 ml
 010277 GC RELINE II Point for Trimming x 3,
 010280 GC RELINE II Wheel for Finishing x 12,
 010283 GC RELINE II Disposable Brush x 6

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Hungary
 Fazekas u. 29-31.
 HU - 1027 Budapest
 Tel. +36.1.204.0400
 hungary@eo.gceurope.com
 www.eo.gceurope.com

Illeszkedés és kényelem az aktív élethez



GC RELINÉ™ II Soft
 és GC RELINÉ™ II
 Extra Soft

Puhán maradó
 szilikon alábélelő anyag
 patronos kiszerezésben



Illeszkedés, funkció és kényelem mellyel mosolyoghat

Irritáció, extrakció vagy egy implantátum behelyezése, mind a kemény és lágy szövetek változásával jár, **így elengedhetlenné válik a fogsor hozzáigazítása ehhez az új állapothoz.**

Mivel az idős páciensek egyre egészségesebbek és aktívabbak napjainkban, ezért szeretnének továbbra is mosolyogni, beszélni és élvezni az étkezést minden alkalommal, még fogsor viselése esetében is.

A **GC Reline II Soft és Extra Soft** tervezésekor a cél az volt, hogy egy vékony réteget képezzen a fogsor és a mucosa közt, mely **segíti a gyógyulást, fenntartja a kényelmes viselést és funkciót** heteken át akár néhány hónapig is.



Képek Dr D. Garcia-Baeza, Spanyolország jóvoltából

Egy könnyen
applikálható szilikon
alábélelő patronos
kiszerelemben

Az anyag ideális viszkozitásának köszönhetően **folyékonyvá válik nyomás hatására, így szépen adaptálható** az összes anatómia részlethez.

Továbbfejlesztett trimmelhetőségének köszönhetően a szélek kiváló finírozása most még könnyebbé vált.

Hosszan tartó
kényelem és
megkönnyebbülés
pácienseinek

A RELINE II alkalmazásakor, a hőmérséklet nem emelkedik a kötés alatt, így sokkal kényelmesebb pácienseinek.

Az anyag **sima és szagtalan marad** valamint megtartja **dimenzióális stabilitását és rugalmasságát** hetekig akár hónapokig. Az eredmény? Egy **tartós és kényelmes megoldás** a fogsort viselő pácienseknek.

Erős adhézió,
mégis egyszerű
kezelés és
igazítás

A **GC RELINE II Primer** for resin fejlett összetétele **erős adhéziót biztosít a fogsorhoz** hosszú időre. Ennek az erős adhézióknak az ellenére nem válik kevésbé rugalmassá.

Az első applikációt követő **3 hónapon belül hozzáadható anyag utólagosan** ezzel követve a mucosa és a csont változásait. Az új **GC RELINE II Remover for resin** lehetővé teszi az alábélelés eltávolítását és gyors cseréjét.



Kedvezőbben trimmelhető, így jobban kialakítható a széli zárása



A szélek védelme a Reline II Finishing Material alkalmazásával



GC RELINE II Primer for resin




GC RELINE II Remover for resin

Képek Dr. D. Seifert, Horvátország jóvoltából

minden körülmények között

A rezilienciától az elaszticitásig:
válasszon a klinikai szituációnak megfelelően

A maga Shore A 32 keménységének köszönhetően, a **GC RELINETM II Extra Soft** egy reziliens anyag. Különösképpen nagy segítség az irritált szövet **normalizálásához**, valamint **támasztószövetek gyógyulásához** extrakciót vagy implantációt követően. Szájban maradhat **napokig vagy hetekig**.

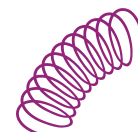

Shore A 48 keménységgel, a **GC RELINETM II Soft** elasztikus marad az idővel, és **mint egy párna, eloszlatja a rágónyomást** anatómiai problémák esetén. Ideális **implantátumok rögzülő fogsorok** alábélelésére a gyógyulási szakaszt követően. Szájban maradhat **hetekig vagy hónapokig**.



Egyszerű applikáció és kezelés az egész eljárás alatt



Az alábélelendő fogsor implantátum behelyezését követően



Tehertementítse az alábélelendő területet és érdesítse át a felszínt



Applikáljon GC RELINE II Primer anyagot a felszínre, enyhén szárítsa meg levegővel



Könnyen használható patronos kiszerelés



Applikálja GC RELINE II (Extra) Soft anyagot, a munkaidő 2 perc



Helyezze a fogsort a szájba és funkcionálja, hagyja a szájban 5 percig



Távolítsa el a felesleget egy szike vagy olló segítségével, igazítsa a GC RELINE II POINT FOR TRIMMING használatával



Finírozza a GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING használatával



Az alábélelt fogsor