

**A szín-
választás
most még
egyszerűbb.**

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

- ▶ Intuitív színárnyalat választás
- ▶ Természetes-alkalmazkodó opacitás
- ▶ Kevesebb készlet





A 3M™ Filtek™ család tagja

Megbízható több mint
50 éve. 2 milliárd
helyreállítás - ami tovább
növekszik.



A 3M™ Filtek™ Dental a **TRUE** nanotechnológiának köszönhetően restaurációs anyagok segítettek a klinikusoknak a világ minden tájáról több, mint 2 milliárd fogpótlásnál. A Filtek termékcsalád olyan lehetőségeket kínál Önnek, amelyekkel gyakorlatilag minden klinikai helyzethez: az anteriortól a poszterior fogazatig, a csúcskategóriás esztétikától a rendkívül hatékony eljárásokig, és a kettő között. Akár univerzális, folyékony vagy ömlesztett töltetű kompozitra, anteriorra vagy poszteriorra van szüksége, a Filtek termékcsalád biztosítja Önnek.

“Nagyon szeretem a Filtek Easy Match Universal-t. A kompozit nagyon jól kezelhető és nagyon szépen polírozható. Az egyszerűsített árnyalat rendszer nagyon szép eredményeket hoz rétegezés nélkül.”

- Dr. Nick Marongiu
La Jolla, CA, USA



Kiváló
polírozhatóság



Kiváló szilárdság
és kopásállóság



Könnyű
kezelhetőség



Melegítésre alkal-
mas kompozit*

* Kapszulák melegítése 70°C/158°F hőmérsékleten legfeljebb 1 órán keresztül.

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

Fényes. Természetes. Meleg. Mindössze 3 árnyalat kiválóan illeszkedik szinte minden páciens mosolyához. Ez egyszerűbb munkafolyamatot jelent az egyszerű restaurációkhoz - olyan természetes megjelenésű eredményekkel, amelyekre büszkék lehetnek páciensei. A 3M™ Filtek™ Easy Match univerzális restaurációs anyag egy klinikailag bizonyított nanotechnológiára épülő, racionalizált rendszer, amely a világszerte megbízható 3M™ Filtek™ fogászati restaurációs anyagok családjának egyik védjegye. Leegyszerűsíti az árnyalatmegfeleltetést, mivel lehetővé teszi, hogy a megfigyeléstől a kiválasztásig gyorsan és intuitív módon jusson el. Anterior vagy poszterior. Blokkoló nélkül - és az opacitás feláldozása nélkül.

Tapasztalja meg az árnyalatok kiválasztásának egyszerűségét.

- Csak 3 árnyalat: világos, természetes, meleg
- Nincs bonyolult fogszínkulcs
- Nincs szükség Blocker használatára

Egyszerűség kompromisszumok nélkül.

Néhány egyszerűbb színárnyalattal rendelkező rendszer esztétikai hátrányokkal járhat. A Filtek Easy Match Universal Restorative kiváló színmegfeleltetést biztosít és egybeolvad a környezetével, így biztosítva a természetes megjelenésű mosolyt.



"A Filtek Easy Match egyszerű megoldást kínál a mindennapi restaurálásokhoz. Racionalizálja készletét, és szállítson olyan restaurációkat, amelyek eltűnnek!"

- Dr. Thomas Giacobbi, Chandler, AZ, USA

Az árnyalat választás intuitív és egyszerű:

A színárnyalat, vagyis a színintenzitás csak az egyik összetevője a nagyszerű árnyalat-megfelelésnek. Még a "megfelelő színű" kompozit is kiemelkedhet a környező fogazatból, ha az érték (relatív világosság/sötétség) vagy az opacitás nem megfelelő. A 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative 3 árnyalata együttesen lefedi a VITA klasszikus árnyalatait - nincs szükség blokkolóra.

"A Filtek Easy Match Universal Restorative leegyszerűsíti az árnyalategyeztetést, és lehetővé teszi a nagyon esztétikus restaurációkat."

- Dr. Augusto Robles
Anniston, AL, USA

Bright



Representative example of Bright tooth shade.



Bright: alacsony chroma, magas érték

Natural



Representative example of Natural tooth shade.



Natural: kiegyensúlyozott, közepes chroma és érték

Warm



Representative example of Warm tooth shade.



Warm: magas chroma és alacsony érték

Főbb előnyök, amelyeket szeretni fog

- Kiváló színkompatibilitás a legtöbb elülső és hátsó restaurációhoz
- Gyors, egyszerű és intuitív színárnyalat-választás az opacitás feláldozása nélkül
- Egyszerűsített egyrétegű restaurációk, nincs szükség blokkolóra
- A racionalizált készlet segít csökkenteni a ritkán használt árnyalatok pazarlását
- Egyszerű használat
- Alkalmos kompozit melegítésre, amely csökkenti az extrúziós erőt¹ a fizikai tulajdonságok megváltoztatása nélkül²



Dr. Brian Baliwas jóvoltából


1. Belső adatok
2. Az IFU-nak megfelelően felmelegítve (kapszulák: 70°C/158°F-ig 1 órán keresztül)

Hogyan működik?

A természetesen alkalmazkodó opacitás erejével.


Néhány egyszínű rendszerrel ellentétben a 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative nem igényel blokkolót a szájüreg sötéttségének elfedéséhez az elülső restaurációkban. Természetesen alkalmazkodó opacitása 0,5-1 mm vastagságban zománchoz hasonló áttetszőséget biztosít - pontosan ott, ahol a ferde és metszőélhez szükséges. Mindenhol máshol ≥ 2 mm vastagságban dentinszerű opacitást biztosít.

Minden kompozit áttetszőbbé válik, ha vékonyabb rétegben alkalmazzák. A Filtek™ Easy Match Universal Restorative természetesen alkalmazkodó opacitása azonban optimálisan illeszkedik a dentinhez és a zománchoz egyaránt, így segít a környező fogszerkezetbe való beolvadásban és természetes megjelenést biztosít.

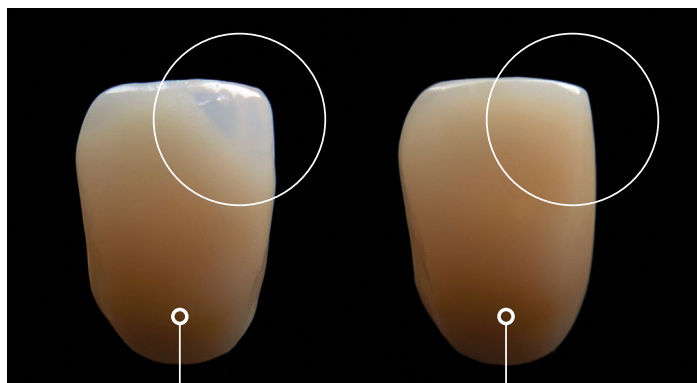

Tokuyama
OMNICHROMA®
Blocker nélkül

3M™ Filtek™ Easy Match Universal
Restorative, Natural Shade
Blocker nélkül

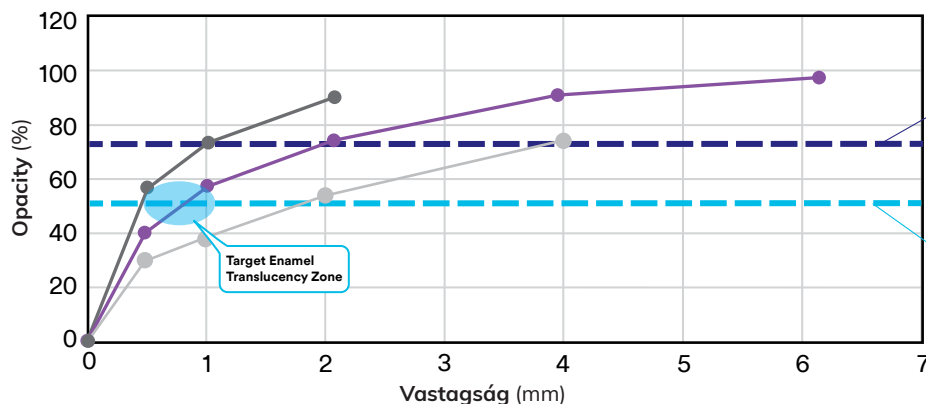

Dentin érték
A 3M™ Filtek™ Easy Match a dentinhez hasonló fedőképességet mutat. ≥ 2 mm vastagságban



Enamel érték
A 3M™ Filtek™ Easy Match az enamelhez hasonló fedőképességet mutat. 0,5-1 mm vastagságban

Forrás: belső adatok


— 3M™ Filtek™ Supreme Ultra Universal Restorative A2-D — Tokuyama OMNICHROMA® (Blocker nélkül)
— 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

Még közelebbről nanotechnológiával

A Filtek Easy Match univerzális fogpótlás ugyanazt a TRUE nanofiller technológiával rendelkezik, amelyet a vezető Filtek fogpótlásainkban használunk. Az egyedülálló nanoklaszterek kiváló kopásállóságot tesznek lehetővé, és segítenek a kompozitnak megőrizni sima felületét és fényét.

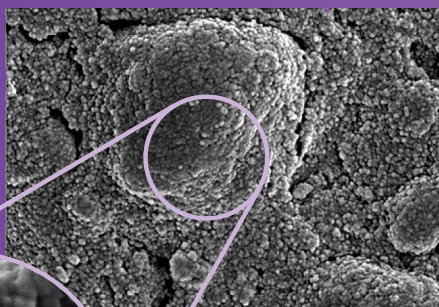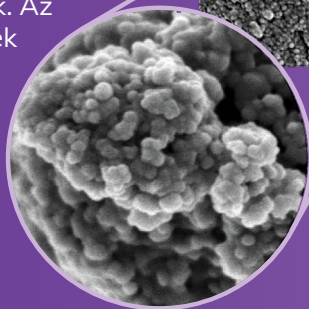

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative nanoklaszter 100x nagyításban.

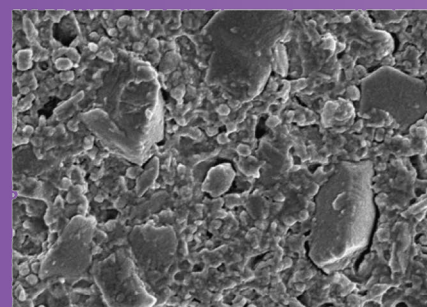

Vezető versenytárs kompozit

SEM photos courtesy of Dr. J. Perdigao, University of Minnesota.